



orthocare®

ortopedi, sporcu saęlıęı ve rehabilitasyon rnleri

## Nefes alan örme teknolojisi

### Comfort line C



- Comfort ürünler, örme teknolojisi ile üretilen özel ürünlerdir.
- Nefes alabilen, hava geçirgen yapısı ile kullanıcıya uzun süreli mükemmel bir rahatlık ve uyum sunar.
- Kompresyon özelliği ve masaj etkisi yaratan pedleri ile son derece konforludur.
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, vücudun kıvrılıp bükülmesi gereken yerlerde buna izin verecek özellikte tasarlanmıştır.
- Elastik özelliği ile giyim kolaylığı sağlar, kullanıcı uyumu mükemmeldir.

3910 Epicare **Comfort C**



3920 Epicare **Comfort C plus**



2910 Lumbocare **Comfort C**



4910 Manucare **Comfort C**



6910 Genucare **Comfort C**



6920 Genucare **Comfort C plus**



7910 Malleocare **Comfort C**



7920 Achicare **Comfort C**



# genucare ROM



**Fleksiyon/extansiyon  
limitli aç ı ayarlı  
dizlik**

Ekstansiyon Aç ıları:  
-15°, 0°, 15°, 30°,  
45°, 60°, 75°

Fleksiyon Aç ıları:  
0°, 15°, 30°, 45°, 60°,  
75°, 90°, 105°, 120°

6320 Genucare ROM



## Endikasyonlar:


- . post operative immobilizasyon
- . diz yaralanmaları sonrası immobilizasyon
- . yaralanmış bağların stabilizasyonu

## Etki Mekanizması

- . immobilizasyon
- . kontrollü hareket/mobilizasyon
- . diz eklemine kolleteral stabilizasyonu

## Özellikler:

- . cilde dost, hava alabilen yumuşak bantlar
- . kolay ayarlanabilen ROM eklem
- . kırılarak boy kısaltmasına olanak sağlayan yan barlar
- . fleksiyon ve ekstansiyonda geniş aç ı aralığı
- . universal tek beden.

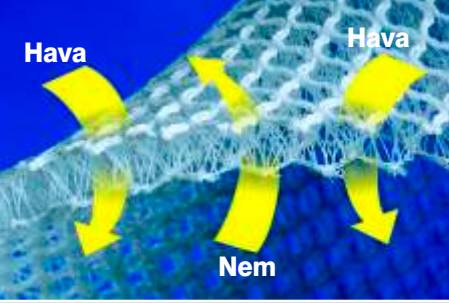

AirX yüksek teknoloji ile üretilen özel bir dokumadır. Nefes alabilen, hava geçirgen yapısı ile kullanıcıya mükemmel bir rahatlık ve uyum sunar.

AirX ile üretilen destekler, diğer malzemelerin aksine, cildin terlemesiyle oluşabilecek problem ve rahatsızlıklara neden olmaz.

AirX, ortopedi ve sporcu sağlığı için mükemmel bir çözümdür.

#### Özellikleri:

- 4-yöne esneyebilir
- yüksek hava geçirgenliği sağlar
- nem transferi yapar
- hafiftir
- latex içermez
- ısıyı ayarlar
- yüzeyi dayanıklıdır
- yıkanabilir.



6741 Genucare**AirX** patella



6730 Genucare**AirX** ligament



6750 Genucare**AirX** stable



6755 Genucare**AirX** stable open




6760 Genucare**AirX** hyperX





nefes alan dokuma

## Comfort Polipropilen

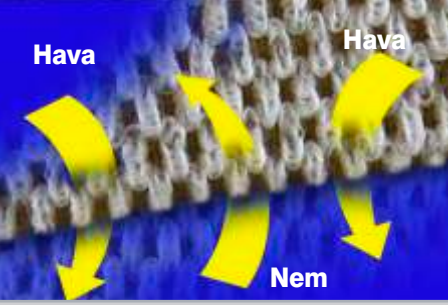

- Nem tutmaz: polipropilen su itici özelliği olan bir polimerdir
- Nefes alır: terleme ile oluşan nemin dokumadan geçmesini ve bedenin hava almasını sağlar
- Hijyeniktir, alerji yapmaz, anti-bakteriyel özellik gösterir
- Polimer yapısı nedeniyle kir ve leke tutmaz
- Güneş ısılarına dayanıklıdır: UV katkı maddesi kullanılarak güneşin zararlı ışınlarının malzemeyi etkilemesinin önüne geçilir.

4515 Manucare **Comfort**



4525 Manucare **Comfort plus**



4545 Manucare **Comfort stable**



4535 Thenarcare **Comfort**



## Comfort Mikrofiber

- Nefes alır: terleme ile oluşan nemin dokumadan geçmesini ve bedenin hava almasını sağlar
- Cilde dosttur, bu amaçla kullanılan diğer bütün stokinetlerden çok daha konforlu ve dayanıklıdır
- Kullanıcıya mükemmel bir rahatlık sunar

1170 Reinforced collar **Comfort**



1180 Soft collar **Comfort**



orthocare<sup>®</sup>





### 1170 Reinforced collar

Plastik destekli sünger boyunluk

|    |                          |
|----|--------------------------|
| cm |                          |
|    |                          |
|    | 1 : 6<br>2 : 8<br>3 : 10 |
|    | Comfort                  |

#### Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikollis

#### Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki eklem yapılarını ve kasları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne kısmen limitler.

#### Özellikler

Hava geçirgen mikrofiber dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger, polietilen destek



### 1180 Soft collar

Sünger boyunluk

|    |                          |
|----|--------------------------|
| cm |                          |
|    |                          |
|    | 1 : 6<br>2 : 8<br>3 : 10 |
|    | Comfort                  |

#### Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikollis

#### Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne çok az limitler.

#### Özellikler

Hava geçirgen mikrofiber dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger



### 1181 Soft collar Eco

Sünger boyunluk

|    |                          |
|----|--------------------------|
| cm |                          |
|    |                          |
|    | 1 : 6<br>2 : 8<br>3 : 10 |

#### Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikollis

#### Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini her yöne çok az limitler.

#### Özellikler

Pamuk dokuma, yüksek yoğunluklu dayanıklı sünger



### 1160 Philadelphia collar

Philadelphia boyunluk

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  |                                   |
|  |                                   |
|  | 0 : 4<br>1 : 6<br>2 : 8<br>3 : 10 |

#### Endikasyon

Servikal travmalar, ameliyat öncesi ve sonrası, servikal stabilizasyon gereken durumlar, yumuşak doku hasarları

#### Etki Mekanizması

Boyun bölgesini stabilize eder, ısı etkisi yaratır ve boyun bölgesindeki yumuşak dokuları destekler.

#### Özellikler

Ön ve arka bölümleri anatomik olarak şekillendirilmiş, X-ray geçirgen plastoizot



### 1150 Vitrafix collar

Çenelikli vitraten boyunluk

|    |          |       |
|----|----------|-------|
|    |          |       |
|    |          |       |
| cm |          |       |
|    | A        | B     |
|    | 1 : 6-8  | 30-40 |
|    | 2 : 6-8  | 35-45 |
|    | 3 : 8-10 | 40-50 |
|    | 4 : 8-10 | 45-55 |

#### Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikollis

#### Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

#### Özellikler

Yüksek yoğunluk polietilen, konfor sağlayan ekstra yumuşak deri kaplı kenarlar



### 1140 Vitra collar

Çeneliksiz vitraten boyunluk

|    |          |       |
|----|----------|-------|
|    |          |       |
|    |          |       |
| cm |          |       |
|    | A        | B     |
|    | 1 : 6-8  | 30-40 |
|    | 2 : 6-8  | 35-45 |
|    | 3 : 8-10 | 40-50 |
|    | 4 : 8-10 | 45-55 |

#### Endikasyon

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikollis

#### Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

#### Özellikler

Yüksek yoğunluk polietilen, konfor sağlayan ekstra yumuşak deri kaplı kenarlar



### 1190 Nelson collar

Nelson tipi boyunluk

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          | <b>A</b> | <b>B</b> |
| <b>0</b> | 8-10     | 30-40    |
| <b>1</b> | 8-10     | 35-45    |
| <b>2</b> | 8-10     | 40-50    |
| <b>3</b> | 8-10     | 45-55    |

#### Endikasyon

Servikal disk hernisi, servikal kas zorlanması/spazmları, postoperatif, boyundaki yapısal bozukluklar

#### Etki Mekanizması

Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş X-ray geçirgen plastozot



### 1330 Clavicare

Klavikula tespit bandajı

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
|  | <b>XS</b> | 40-60   |
|  | <b>S</b>  | 60-75   |
|  | <b>M</b>  | 75-90   |
|  | <b>L</b>  | 90-105  |
|  | <b>XL</b> | 105-120 |

#### Endikasyon

Klavikula kırıklarında, omuz eklemi yaralanmalarında.

#### Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur, omurganın dik tutulmasını sağlar.

#### Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, sırt üstü yatarken bile konforlu



### 1335 Acromio clavicare

Acromio klavikula ortezi

universal

#### Endikasyon

Akromioklaviküler eklemin çıkık, zorlanma ve yaralanmalarında.

#### Etki Mekanizması

Omuzları normal pozisyonunda tutarak klavikula kırıklarında iyileşmeye destek olur.

#### Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velcro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi



### 3510 Armsling velcro

Kol askısı

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | <b>XS</b> | 20-25 |
|  | <b>S</b>  | 30-36 |
|  | <b>M</b>  | 36-42 |
|  | <b>L</b>  | 42-48 |

#### Endikasyon

Subakromial dekompresyon, genel omuz instabilitesi, omuzu ilgilendiren yaralanma ve incinmeler, rotator cuff yaralanmaları, minor humerus kırıkları, cerrahi sonrası immobilizasyon

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin

inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

#### Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velcro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon, başparmak askısı ile daha rahat kullanım



### 3410 Armsling classic

Kol askısı

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | <b>S</b> | 30-36 |
|  | <b>M</b> | 36-42 |
|  | <b>L</b> | 42-48 |

#### Endikasyon

Humerus kırığı, omuz yaralanmaları, kolun stabilizasyonunu gerektiren durumlar, önkolun alçılı durumları

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

#### Özellikler

Dayanıklı ve ayarlanabilir bantlar, hafif kumaş



### 3411 Armsling light

Kol askısı

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | <b>S</b> | 30-36 |
|  | <b>M</b> | 36-42 |
|  | <b>L</b> | 42-48 |

#### Endikasyon

Humerus kırığı, omuz yaralanmaları, kolun stabilizasyonunu gerektiren durumlar, önkolun alçılı durumları

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

#### Özellikler

Dayanıklı ve ayarlanabilir bantlar, hava alabilen hafif ve konforlu kumaş





### 3511 Shoulder abduction 15

Omuz abdüksiyon yastığı 15°

universal

#### Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için 15 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar,

omuz subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır.

#### Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro sistemi, ayarlanabilir kol askısı



### 3512 Shoulder abduction 30/45

Omuz abdüksiyon yastığı 30/45°

universal

#### Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için 30 ya da 45 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar,

omuz subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır

#### Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro sistemi, ayarlanabilir kol askısı, 30 ya da 45 derecede opsiyonel pozisyonlama.



### 3513 Shoulder abduction lateral

Omuz abdüksiyon yastığı 90°

universal

#### Endikasyon

Post-operatif immobilizasyon, rotator cuff tamiri sonrası, sub-akromial dekompresyon, konservatif omuz tedavisinde immobilizasyon

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için, yanlarda 90 derece abdüksiyonda özel bir pozisyonlama sağlar, omuz

subluksasyonunu önleyici bir etki yaratır

#### Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro sistemi, ayarlanabilir kol askısı, özel şekillendirilmiş yastıkla mükemmel pozisyonlama.



### 1741 Velpocare uni

Omuz stabilizasyon ortezi

universal

#### Endikasyon

Humerus kırıklarında, omuzun tam stabilizasyonu için

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksini stabilize eder, glenohumeral eklemin inferior subluksasyon /dislokasyonunu önleyici bir etki yaratır.

#### Özellikler

Konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro sistemi, göğüs bandı ile ekstra stabilizasyon



### 3026 Shoulder support

Omuzluk

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cm                                                                                  |         |
|  |         |
| <b>S</b>                                                                            | : 28-32 |
| <b>M</b>                                                                            | : 32-35 |
| <b>L</b>                                                                            | : 35-38 |

#### Endikasyon

Hafif dereceli omuz çıkıkları, ağırlı omuz ve omuz bölgesinin inflamatuvar durumları.

#### Etki Mekanizması

Omuz kompleksi için koruyucu bir pozisyon sağlar, omuz çevresi yumuşak dokuları destekler, omuz bölgesinde

sağlanan basınçla ileri düzey ödem oluşumunu engeller, proprioseptif geri bildirim sağlar.

#### Özellikler

Kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen, pratik velkro ve ayarlanabilir esnek bant sistemi, üst kol ve omuz çevresini saran mükemmel anatomik yapı



### 3130 Epicare active

Dirseklik

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cm                                                                                    |         |
|  |         |
| <b>S</b>                                                                              | : 20-23 |
| <b>M</b>                                                                              | : 23-27 |
| <b>L</b>                                                                              | : 27-30 |
| <b>XL</b>                                                                             | : 30-32 |
| <b>XXL</b>                                                                            | : 32-35 |

#### Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı

#### Etki Mekanizması

Dirsek eklemi için geniş düzeyli bir destek sağlar, dirsek bölgesi yumuşak dokuları

destekler, ısı özelliği ile iyileşme süreçlerine yardımcı olur.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, basit ve kullanışlı tasarım

Orthoocare<sup>®</sup>





### 3910 Epicare Comfort

Epikondilit destekli, örme dirseklik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-23 |
| <b>M</b> :   | 23-27 |
| <b>L</b> :   | 27-30 |
| <b>XL</b> :  | 30-32 |
| <b>XXL</b> : | 32-35 |

#### Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

#### Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, tendonlardaki gerginliği azaltır, silikon ped ile dirsek çevresi yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar.

#### Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı ve yanlarda destekleyici silikon pedler, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen comfort örme sistemi



### 3920 Epicare Comfort plus

Knitted elbow support with silicon pads and epycondilitis strap

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-23 |
| <b>M</b> :   | 23-27 |
| <b>L</b> :   | 27-30 |
| <b>XL</b> :  | 30-32 |
| <b>XXL</b> : | 32-35 |

#### Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

#### Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, tendonlardaki gerginliği azaltır, silikon ped ve extra bant ile yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar.

#### Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı ve yanlarda destekleyici silikon pedler, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, kompresyonu ayarlanabilen epikondilit bandı , yüksek esnekliğe sahip hava geçirgen comfort örme sistemi.



### 3911 Epicare Easy

Örme dirseklik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-23 |
| <b>M</b> :   | 23-27 |
| <b>L</b> :   | 27-30 |
| <b>XL</b> :  | 30-32 |
| <b>XXL</b> : | 32-35 |

#### Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit.

#### Etki Mekanizması

Dirsek çevresi yumuşak dokulara destek sağlar, proprioseptif etki gösterir.

#### Özellikler

Anatomik olarak örülmüş yapı, dirsek ve dirsek içine gelen extra konforlu bölgeler, yüksek esnekliğe sahip, hava geçirgen örme sistemi



### 3135 Epicare active plus

Epikondilit destekli dirseklik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-23 |
| <b>M</b> :   | 23-27 |
| <b>L</b> :   | 27-30 |
| <b>XL</b> :  | 30-32 |
| <b>XXL</b> : | 32-35 |

#### Endikasyon

Tenosinovit osteoartrit, dirsek ağrısı, medial ve lateral epikondilit, tenisçi dirseği

#### Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, dirsek çevresi yumuşak dokuları destekler, proprioseptif destek sağlar, ısı özelliği ile iyileşme süreçlerine yardımcı olur.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, kompresyonu ayarlanabilen portatif velkro sistemli epikondilit bandı ve pedler, daha fazla uyum için ayarlanabilir üst kol genişliği



### 3125 Epicare plus

Epikondilit bandı (çift pedli)

|           |
|-----------|
| universal |
|-----------|

#### Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

#### Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

#### Özellikler

Kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velkro sistemi ve portatif pedler



### 3120 Epicare

Epikondilit bandı (tek pedli)

|           |
|-----------|
| universal |
|-----------|

#### Endikasyon

Medial ve lateral epikondilit, epikondilitis humeri (tenisçi dirseği)

#### Etki Mekanizması

Yaralanmış tendon yapılarının doğru pozisyonlanmasına destek olur, proprioseptif destek sağlar.

#### Özellikler

Basit, kullanımı kolay ve etkili tasarım, kompresyonu ayarlanabilen velkro sistemi ve portatif ped





### 4330 Thenarcare form

Termoplastik destekli başparmak tespit ateli

| cm                                                                                | sol/sağ                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XS</b> : 13-14<br><b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteartirit, travmatik problemler

#### Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

#### Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



### 4325 Manucare form

Termoplastik destekli el bilek ateli

| cm                                                                                  | sol/sağ                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

#### Etki Mekanizması

El bileğini volar ve dorsaldan

destekler, stabilize eder.

#### Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



### 4511 Manucare D

El bilek ateli

| cm                                                                                  | sol/sağ                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

#### Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

#### Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



### 4521 Manucare D plus

Başparmak destekli el bilek ateli

| cm                                                                                    | sol/sağ                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

MCP eklem sorunları, CMC eklem dejenerasyonları, dequarvein, karpal tünel ve dequarveinin beraber olduğu durumlar

#### Etki Mekanizması

Bileği ve başparmağı destekler.

#### Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



### 4531 Thenarcare D

Başparmak tespit ateli

| cm                                                                                  | sol/sağ                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteoartirit, travmatik problemler

#### Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

#### Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş başparmak ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint.



### 4541 Manucare D stable

El bilek ateli ekstra destek bantlı

| cm                                                                                    | sol/sağ                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabilite, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

#### Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla destek sağlar, başparmağın hareketine olanak tanır.

#### Özellikler

Yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint





### 4910 Manucare Comfort C

El bilek ateli

| cm                                                                                | sol/sağ                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XS</b> : 13-14<br><b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

El bileği zorlanmaları, alt uç kırıkları alçı sonrası, tenosinovit, karpal instabiliteler

#### Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır, comfort örme proprioseptif etki yaratır.

#### Özellikler

Anatomik yapıya uygun örülen hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, bileği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, şekillendirilebilir termoplastik splint



### 4320 Manucare active

El bilek ateli

| cm                                                                                  | sol/sağ                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XS</b> : 13-14<br><b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

El bileği zorlanmaları, alt uç kırıkları alçı sonrası, tenosinovit, karpal instabiliteler

#### Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

#### Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



### 4515 Manucare Comfort

El bilek ateli

| cm                                                                                  | sol/sağ                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XS</b> : 14-15<br><b>S</b> : 15-16,5<br><b>M</b> : 16,5-18<br><b>L</b> : 18-19,5<br><b>XL</b> : 19,5-21<br><b>XXL</b> : 21-22,5 |

#### Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliteler, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

#### Etki Mekanizması

Bileği destekler, başparmağın hareketine olanak tanır.

#### Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



### 4525 Manucare Comfort plus

Başparmak destekli el bilek ateli

| cm                                                                                    | sol/sağ                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XS</b> : 14-15<br><b>S</b> : 15-16,5<br><b>M</b> : 16,5-18<br><b>L</b> : 18-19,5<br><b>XL</b> : 19,5-21<br><b>XXL</b> : 21-22,5 |

#### Endikasyon

MCP eklem sorunları, CMC eklem dejenerasyonları, dequarvein, karpal tünel ve dequarveinin beraber olduğu durumlar

#### Etki Mekanizması

Bileği ve başparmağı destekler.

#### Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el, bilek ve başparmağa tam oturan yapı, şekillendirilebilir termoplastik splint



### 4535 Thenarcare Comfort

Başparmak tespit ateli

| cm                                                                                  | sol/sağ                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XS</b> : 12-14<br><b>S</b> : 14-16<br><b>M</b> : 16-18<br><b>L</b> : 18-20<br><b>XL</b> : 20-22 |

#### Endikasyon

Başparmağın dejeneratif durumları, dequarvein, osteoartrit, travmatik problemler

#### Etki Mekanizması

Başparmağın CMP ve MCP eklemlerini destekler.

#### Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen polipropilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş bilek ve başparmağa tam oturan ve rahatlık sağlayan yapı, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi.



### 4545 Manucare Comfort stable

El bilek ateli ekstra destek bantlı

| cm                                                                                    | sol/sağ                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>XS</b> : 14-15<br><b>S</b> : 15-16,5<br><b>M</b> : 16,5-18<br><b>L</b> : 18-19,5<br><b>XL</b> : 19,5-21<br><b>XXL</b> : 21-22,5 |

#### Endikasyon

Tenosinovit, karpal instabiliteler, CTS, el bileği kırıklarında alçı sonrası, romatoid artrit, gonglion ağrısı, el bileği yumuşak doku travmaları

#### Etki Mekanizması

Bileği destekler, ekstra bant ve geniş atelle daha fazla destek sağlar, başparmağın

hareketine olanak tanır.

#### Özellikler

İleri teknoloji ile üretilen poli-propilen dokumanın sağladığı hava geçirgen, nemi dışarı transfer eden, anti-alerjik özelliklerle gelen yüksek konfor ve uyum, anatomik olarak şekillendirilmiş el ve bileğe tam oturan yapı, ekstra kompresyon ve destek sağlayan, ayarlanabilen velkro sistemli geniş bilek bandı, geniş ve şekillendirilebilir termoplastik splint

OrthoCare<sup>®</sup>





### 1710 Sternicare

Göğüs korsesi (fleksible balenli)

### 1711 Sternicare plus

Göğüs korsesi (çelik balenli)

|    |               |
|----|---------------|
| cm | S : 95-105    |
|    | M : 85-95     |
|    | L : 75-85     |
|    | XL : 65-75    |
|    | XXL : 105-115 |

#### Endikasyon

Sternum ameliyatı sonrası, sternum stabilizasyonu gereken durumlarda.

#### Etki Mekanizması

Sternoklaviküler eklemler ile göğüs kafesini stabilize eder, ısı etkisi ve proprioseptif etki ile cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

#### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir omuz bantları.



### 2110 Dosicare

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

### 2130 Dosicare plus

Lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

|    |               |
|----|---------------|
| cm | S : 64-72     |
|    | M : 72-80     |
|    | L : 80-90     |
|    | XL : 90-100   |
|    | XXL : 100-110 |

#### Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, dorsal kas zayıflıkları, propriosepsiyonun arttırılması gereken durumlar.

#### Etki Mekanizması

Bel bölgesindeki eklem ve kas yapılarını destekler, ısı ve proprioseptif etki sağlar, bel bölgesinde özellikle fleksiyon

ve ekstansiyon yönündeki hareketleri limitler.

#### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve dayanıklı esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, parçalı ön bantlar ile sağlanan yüksek konfor ve uyum, hareketi hafif sınırlayan plastik balenler



### 2530 Lumbocare light

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

|    |               |
|----|---------------|
| cm | S : 64-72     |
|    | M : 72-80     |
|    | L : 80-90     |
|    | XL : 90-100   |
|    | XXL : 100-110 |

#### Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

#### Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

#### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlayan plastik balenler



### 2540 Lumbocare high

Uzun lumbosakral bel korsesi (çelik balenli)

|    |               |
|----|---------------|
| cm | S : 64-72     |
|    | M : 72-80     |
|    | L : 80-90     |
|    | XL : 90-100   |
|    | XXL : 100-110 |

#### Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

#### Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler, akut bel ağrısında aktivite düzeyini arttırarak iyileşmeyi hızlandırır.

#### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlayan çelik balenler



### 2510 Abdominocare

Karın korsesi

|    |               |
|----|---------------|
| cm | S : 64-72     |
|    | M : 72-80     |
|    | L : 80-90     |
|    | XL : 90-100   |
|    | XXL : 100-110 |

#### Endikasyon

Abdominal bölge operasyonu sonrası

#### Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler. Abdominal duvarı korur ve cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

#### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi



### 2550 Dorsocare

Dorsolomber bel korsesi (çelik balenli)

|    |               |
|----|---------------|
| cm | S : 64-72     |
|    | M : 72-80     |
|    | L : 80-90     |
|    | XL : 90-100   |
|    | XXL : 100-110 |

#### Endikasyon

Torakal ve lumbal bölge stabilizasyonu için, postoperatif immobilizasyon, akut ve kronik lumbago.

#### Etki Mekanizması

Tüm omurgayı destekler ve doğru pozisyonda tutar, omurga hareketlerini tüm yönlerde kısmen limitler,

proprioseptif geri bildirim sağlar.

#### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velkro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlayan çelik balenler





### 4000 Backtone

Elektronik sensörlü dik duruş korsesi (sesli ya da titreşimli uyarı)

|                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| cm                                                                                |                                                            |
|  | <b>S</b> : 50-85<br><b>M</b> : 60-100<br><b>L</b> : 90-132 |

#### Endikasyon

Postür desteği olarak, postür bozuklukları, omuz ve sırt kaslarının zayıflığı

#### Etki Mekanizması

Sesli ya da titreşimli uyarı modu ile öne doğru kamburlaştığınız anda uyarır ve duruşun düzeltilmesini sağlar

#### Özellikler

Sesli ya da titreşimli uyarı özelliği, hareket özgürlüğü sağlayan kullanımı kolay, dayanıklı askılar, kauçuk destekli bel bandı ile pozisyonu korunan sensör, hafif, şık ve konforlu tasarım.



### 1320 Posturecare

Dik duruş korsesi

|                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| cm                                                                                  |                                                                                |
|  | <b>S</b> : 64-72<br><b>M</b> : 72-80<br><b>L</b> : 80-90<br><b>XL</b> : 90-100 |

#### Endikasyon

Postür desteği olarak, postür bozuklukları, omuz ve sırt kaslarının zayıflığı

#### Etki Mekanizması

Sırt bölgesinin doğru duruş şekli ile dik tutulmasına destek olur, sırt kasları için proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, kolay ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, ayarlanabilir omuz bantları, hareketi hafif sınırlayan konforlu spiral balenler

kas zayıflamasını



### 2531 Lumbocare Eco light

Lumbosakral bel korsesi (fleksible/metal balenli)

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cm                                                                                  |                                                                                                        |
|  | <b>S</b> : 64-72<br><b>M</b> : 72-80<br><b>L</b> : 80-90<br><b>XL</b> : 90-100<br><b>XXL</b> : 100-110 |

#### Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

#### Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler.

Akut bel ağrısında aktivite düzeyini artırarak iyileşmeyi hızlandırır.

#### Özellikler

Esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlayan metal balenler



### 2541 Lumbocare Eco high

Uzun lumbosakral bel korsesi (metal balenli)

|                                                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cm                                                                                    |                                                                                                        |
|  | <b>S</b> : 64-72<br><b>M</b> : 72-80<br><b>L</b> : 80-90<br><b>XL</b> : 90-100<br><b>XXL</b> : 100-110 |

#### Endikasyon

Akut bel ağrısı, dejeneratif disk, paravertebral kas spazmı, lumbago, sakroiliak eklem irritasyonları, tendomiyopati.

#### Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler,

akut bel ağrısında aktivite düzeyini artırarak iyileşmeyi hızlandırır.

#### Özellikler

Esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi sınırlayan metal balenler



### 2511 Abdominocare Eco

Karın korsesi

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cm                                                                                  |                                                                                                        |
|  | <b>S</b> : 64-72<br><b>M</b> : 72-80<br><b>L</b> : 80-90<br><b>XL</b> : 90-100<br><b>XXL</b> : 100-110 |

#### Endikasyon

Abdominal bölge operasyonu sonrası

#### Etki Mekanizması

Abdominal kasları kısa pozisyonda tutarak daha ileri düzey kas zayıflamasını önler. Abdominal duvarı korur ve cerrahi sonrası iyileşmeyi destekler.

#### Özellikler

Esnek kumaş, hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi



### 2810 Back support wool

Bel korsesi (yün)

|                                                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cm                                                                                    |                                                                                                        |
|  | <b>S</b> : 64-72<br><b>M</b> : 72-80<br><b>L</b> : 80-90<br><b>XL</b> : 90-100<br><b>XXL</b> : 100-110 |

#### Endikasyon

Romatizma, sıyatik, post-travmatik durumlar

#### Etki Mekanizması

Kan akışını azaltır, ağrıları azaltır ve ısı artışı sağlar.

#### Özellikler

Yüksek kaliteli ve esnek angoret yün kumaş





## 2710 Dasicare maternity

Hamile korsesi

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| cm                                                                                |  |
|  |  |
| <b>S</b> : 70-85                                                                  |  |
| <b>M</b> : 85-100                                                                 |  |
| <b>L</b> : 100-115                                                                |  |

### Endikasyon

Akut ve kronik bel ağrıları, dejeneratif omurga problemleri, paravertebral kas spazmı, mekanik bel ağrısı, lumbal instabilite.

### Etki Mekanizması

Lumbosakral bölgedeki yumuşak doku ve yapıları destekler, özellikle rotasyon yönündeki hareketleri hafifçe limitler.

### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlayan plastik balenler



## 2535 Lumbocare Q

Lumbosakral bel korsesi (fleksible balenli)

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cm                                                                                  |  |
|  |  |
| <b>S</b> : 64-72                                                                    |  |
| <b>M</b> : 72-80                                                                    |  |
| <b>L</b> : 80-90                                                                    |  |
| <b>XL</b> : 90-100                                                                  |  |
| <b>XXL</b> : 100-110                                                                |  |

### Endikasyon

Akut ve kronik bel ağrıları, dejeneratif omurga problemleri, paravertebral kas spazmı, mekanik bel ağrısı, lumbal instabilite.

### Etki Mekanizması

Lumbosakral bölgedeki yumuşak doku ve yapıları destekler, özellikle rotasyon yönündeki hareketleri hafifçe limitler.

### Özellikler

Cildi tahriş etmeyen yüksek kaliteli ve esnek kumaş, giyim kolaylığı sağlayan el geçirme bantları ve hızlı giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, ayarlanabilir üst bantlar ile ekstra stabilizasyon, hareketi hafif sınırlayan plastik balenler



## 2610 Dasicare active

Termal bel korsesi

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cm                                                                                  |  |
|  |  |
| <b>S</b> : 64-72                                                                    |  |
| <b>M</b> : 72-80                                                                    |  |
| <b>L</b> : 80-90                                                                    |  |
| <b>XL</b> : 90-100                                                                  |  |
| <b>XXL</b> : 100-110                                                                |  |

### Endikasyon

Intervertebral kas spazmlarında, travma sonrası hematoma ve enflamasyonlarda, kompresyon amaçlı, bel ağrısı ve bel kaslarının zorlanması durumlarında

### Etki Mekanizması

Lumbosakral bölgedeki

yumuşak doku ve yapıları destekler, özellikle rotasyon yönündeki hareketleri hafifçe limitler, kan akımını artırır, ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



## 5390 Thermal vest

Termal yelek

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cm                                                                                    |  |
|  |  |
| <b>L</b> : 90-100                                                                     |  |
| <b>XL</b> : 100-110                                                                   |  |

### Endikasyon

Azalmış gövde stabilizasyonu, kan dolaşımında yetersizlik ve ısınma amaçlı

### Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, ısı artışı sağlar.

### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite esnek ve yumuşak neopren materyal.



## 5380 Thermal pant

Termal tayt

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cm                                                                                  |  |
|  |  |
| <b>S</b> : 64-72                                                                    |  |
| <b>M</b> : 72-80                                                                    |  |
| <b>L</b> : 80-90                                                                    |  |
| <b>XL</b> : 90-100                                                                  |  |
| <b>XXL</b> : 100-110                                                                |  |

### Endikasyon

Kalça, kasık ve bel bölgesini ilgilendiren zorlanma ve enflamasyonlar.

### Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, ısı artışı sağlar.

### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite esnek ve yumuşak neopren materyal.



## 5141 Groin support

Kasıklık

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| cm                                                                                    | sol/sağ           |
|  |                   |
|                                                                                       | <b>S</b> : 49-51  |
|                                                                                       | <b>M</b> : 51-54  |
|                                                                                       | <b>L</b> : 54-57  |
|                                                                                       | <b>XL</b> : 57-60 |

### Endikasyon

Kalça çevresi kasların yaralanma ve gerilmeleri, kalça ekleminin stabilizasyonunu gerektiren durumlar

### Etki Mekanizması

Kan akımını artırır, kasığı destekler ve ısı artışı sağlar, kasların esneme/gerilme

hareketlerini kolaylaştırır, proprioseptif etki oluşturur.

### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.

orthocare<sup>®</sup>





### 6910 Genucare Comfort

Patella destekli, flexible balenli örme dizlik

|     | A     | B     |
|-----|-------|-------|
| XS  | 41-43 | 28-31 |
| S   | 43-46 | 31-34 |
| M   | 46-49 | 34-37 |
| L   | 49-52 | 37-40 |
| XL  | 52-56 | 40-43 |
| XXL | 56-58 | 43-46 |

#### Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

#### Etki Mekanizması

Elastik örme dokumanın sağladığı kompresyon ve patella pedi sayesinde diz kapağı ve eklemnin stabilitesinin artırılmasını ve

desteklenmesini sağlar, comfort örme proprioseptif etki yaratır.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda spiral balenler



### 6920 Genucare Comfort plus

Patella destekli, flexible balenli örme dizlik (ekstra bantlı)

|     | A     | B     |
|-----|-------|-------|
| XS  | 41-43 | 28-31 |
| S   | 43-46 | 31-34 |
| M   | 46-49 | 34-37 |
| L   | 49-52 | 37-40 |
| XL  | 52-56 | 40-43 |
| XXL | 56-58 | 43-46 |

#### Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

#### Etki Mekanizması

Elastik örme dokumanın sağladığı kompresyon ve patella pedi sayesinde diz kapağı ve eklemnin stabilitesinin artırılmasını ve desteklenmesini sağlar,

comfort örme proprioseptif etki yaratır.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş popliteal bölge dokuması ve dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda spiral balenler



### 6741 Genucare AirX patella

Patella destekli Air-X dokuma dizlik

| cm | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 |

#### Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

#### Etki Mekanizması

Diz kapağı ve diz eklemnin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı

destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş ile yüksek hasta uyumu ve daha rahat kullanım



### 6730 Genucare AirX ligament

Patella destekli, flexible balenli Air-X dokuma dizlik

| cm | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 |

#### Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

#### Etki Mekanizması

Diz eklemnin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda spiral balenler.



### 6750 Genucare AirX stable

Patella destekli, polisentrik eklemlü Air-X dokuma dizlik

| cm | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 |

#### Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

#### Etki Mekanizması

Diz eklemnin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem



### 6755 Genucare AirX open

Polisentrik eklemlü Air-X dokuma dizlik (önden açık model)

| cm | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 |

#### Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

#### Etki Mekanizması

Diz eklemnin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, Air-X kumaş

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, önde kapanan pratik velkro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem





## 6760 Genucare AirX hyperX

Hiper ekstansiyonu engelleyen polisentrik eklemlerli Air-X dokuma dizlik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 30-33 |
| <b>M</b> :   | 33-36 |
| <b>L</b> :   | 36-39 |
| <b>XL</b> :  | 39-42 |
| <b>XXL</b> : | 42-45 |

### Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

### Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, Air-X kumaş proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, nemi dışarı atabilen, ileri teknoloji esnek Air-X kumaş, giyim kolaylığı, arkada hiperekstansiyonu engelleyen çapraz bantlar, önde daha fazla hasta uyumu için esnek velkro bantlar, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem



## 6876 Patellar tendon support

Patellar tendon bandı

universal

### Endikasyon

Patello-femoral ağrı, diz ekleminin hafif instabilitesi

### Etki Mekanizması

Ped yardımıyla proprioseptif etki yaratarak diz eklemine destek olur.

### Özellikler

Patella pedi ile desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



## 6157 Genucare knee jumper

Jumper's knee için dizlik

|            |       |
|------------|-------|
| cm         |       |
|            |       |
| <b>S</b> : | 30-35 |
| <b>M</b> : | 35-40 |
| <b>L</b> : | 40-45 |

### Endikasyon

Osgood schaltter, jumper's knee

### Etki Mekanizması

Patellar tendona uyguladığı baskı sayesinde patellar ağrını giderir, patellanın üstünden geçen bant sayesinde patellayı stabilize eder.

### Özellikler

Dayanıklı bantlarla desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



## 6158 Genucare Luxa

Lateral pedli dizlik

|            |       |
|------------|-------|
| cm         |       |
|            |       |
| <b>S</b> : | 30-35 |
| <b>M</b> : | 35-40 |
| <b>L</b> : | 40-45 |

### Endikasyon

Patellanın luksasyonu, patello-femoral ağrı, lateral bölge ameliyatı sonrası

### Etki Mekanizması

Ped ve bantların yardımıyla diz kapağının stabilitesini sağlar, patellar tendon üzerindeki baskıyı azaltır.

### Özellikler

Patella pedi ve dayanıklı bantlarla desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



## 6040 Thigh support

Uyluk desteği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 48-50 |
| <b>M</b> :   | 50-52 |
| <b>L</b> :   | 52-54 |
| <b>XL</b> :  | 54-56 |
| <b>XXL</b> : | 56-58 |

### Endikasyon

Hamstring yada quadriceps kasını ilgilendiren yaralanmalar ile hamstring gerginliği, quadriceps kontüzyonu.

### Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, uyluğu destekler ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.



## 6060 Calf support

Alt baldırlık

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 31-33 |
| <b>M</b> :   | 33-35 |
| <b>L</b> :   | 35-37 |
| <b>XL</b> :  | 37-39 |
| <b>XXL</b> : | 39-41 |

### Endikasyon

Kompartman sendromu, kontüzyonlar, shin splint, baldırı ilgilendiren kas yaralanmaları

### Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, baldırı destekler ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, daha fazla uyum için ayarlanabilir genişlik, yüksek kalite neopren materyal.





### 6911 Genucare Easy

Örme dizlik

|     | A     | B     |
|-----|-------|-------|
| XS  | 41-43 | 28-31 |
| S   | 43-46 | 31-34 |
| M   | 46-49 | 34-37 |
| L   | 49-52 | 37-40 |
| XL  | 52-56 | 40-43 |
| XXL | 56-58 | 43-46 |

#### Endikasyon

Postartroskopi ve postoperatif durumlar dahil dizin tüm enflamasyon ve zorlanmaları, kas ve bağ zorlanmaları, bursitler, kronik dejeneratif eklemler hastalıkları, osteoartrit ve romatoid artrit

#### Etki Mekanizması

İrrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon

uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan masaj etkisinin de katkısıyla dizi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır, proprioseptif etki yaratır.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip örme sistem, yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım.



### 6120 Genucare basic

Dizlik

| cm  |       |
|-----|-------|
| S   | 30-33 |
| M   | 33-36 |
| L   | 36-39 |
| XL  | 39-42 |
| XXL | 42-45 |

#### Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, dizin diğer ağırlı durumları

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz eklemine destek verir ve ısı artışı sağlar, diz ekleminde oluşan stresi azaltır ve koordinasyonu artırır, proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



### 6140 Genucare basic open

Patellası açık dizlik

| cm  |       |
|-----|-------|
| S   | 30-33 |
| M   | 33-36 |
| L   | 36-39 |
| XL  | 39-42 |
| XXL | 42-45 |

#### Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, patellofemoral ağrı

#### Etki Mekanizması

Kan akımını ve koordinasyonu artırır, diz eklemine destek verir ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



### 6141 Genucare patella

Patella destekli dizlik

| cm  |       |
|-----|-------|
| S   | 30-33 |
| M   | 33-36 |
| L   | 36-39 |
| XL  | 39-42 |
| XXL | 42-45 |

#### Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, patellofemoral ağrı, instabilite

#### Etki Mekanizması

Ped özellikle diz kapağı ve dolayısı ile diz ekleminin stabilitesinin artışı ve desteklenmesinde rol alır,

ısı artışı sağlar, proprioseptif etki oluşturur.

#### Özellikler

Patella pedi ile desteklenmiş, anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, yüksek kalite neopren materyal.



### 6130 Genucare ligament

Patella destekli, flexible balenli dizlik

| cm  |       |
|-----|-------|
| S   | 30-33 |
| M   | 33-36 |
| L   | 36-39 |
| XL  | 39-42 |
| XXL | 42-45 |

#### Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda spiral balenler, yüksek kalite neopren materyal.



### 6135 Genucare ligament open

Flexible balenli dizlik (önden açık model)

| cm  |       |
|-----|-------|
| S   | 30-33 |
| M   | 33-36 |
| L   | 36-39 |
| XL  | 39-42 |
| XXL | 42-45 |

#### Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomiyopati, instabilite

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Önde kapanan pratik velkro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda spiral balenler, yüksek kalite neopren materyal.



### 6150 Genucare stable

Patella destekli, çelik balenli dizlik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 30-33 |
| <b>M</b> :   | 33-36 |
| <b>L</b> :   | 36-39 |
| <b>XL</b> :  | 39-42 |
| <b>XXL</b> : | 42-45 |

#### Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler,

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

#### Özellikler

Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



### 6155 Genucare stable open

Çelik balenli önden açık dizlik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 30-33 |
| <b>M</b> :   | 33-36 |
| <b>L</b> :   | 36-39 |
| <b>XL</b> :  | 39-42 |
| <b>XXL</b> : | 42-45 |

#### Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini

sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Önde kapanan pratik velkro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



### 6160 Genucare hyperX

Hiper ekstansiyonu engelleyen çelik balenli dizlik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 30-33 |
| <b>M</b> :   | 33-36 |
| <b>L</b> :   | 36-39 |
| <b>XL</b> :  | 39-42 |
| <b>XXL</b> : | 42-45 |

#### Endikasyon

ACL, PCL yaralanmalarında, 1. ve 2. derece menisküs dejenerasyonları, kollateral bağ yaralanmalarının konservatif tedavisinde, romatoid artrit

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilize edilmesini ve desteklenmesini sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler,

proprioseptif etki sağlar, hiper-ekstansiyonu engeller.

#### Özellikler

Arkada hiperekstansiyonu engelleyen çapraz bantlar ve önde kapanan pratik velkro sistemi ile yüksek hasta uyumu, popliteal bölgede kullanılan özel kumaş sayesinde daha rahat kullanım, yanlarda poli-sentrik eklem, yüksek kalite neopren materyal.



### 6310 Genucare immobiliser

Diz immobilizeri

|            |    |
|------------|----|
| cm         |    |
|            |    |
| <b>S</b> : | 40 |
| <b>M</b> : | 50 |
| <b>L</b> : | 60 |

#### Endikasyon

Postoperatif immobilizasyon, menisküs yaralanmaları, ACL, PCL yaralanmaları

#### Etki Mekanizması

Dizin immobilize edilmesini sağlar, patellafemoral eklem üzerindeki basıncı azaltır.

#### Özellikler

Pratik velkro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, cilde dost yüksek kaliteli ve dayanıklı velkro tutucu kumaş, çıkarılabilir lateral ve medial splintler.



### 6121 Genucare basic light

Dizlik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 30-33 |
| <b>M</b> :   | 33-36 |
| <b>L</b> :   | 36-39 |
| <b>XL</b> :  | 39-42 |
| <b>XXL</b> : | 42-45 |

#### Endikasyon

Osteo-artrit, efüzyon, dizin diğer ağrılı durumları

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz ekleminde destek verir ve ısı artışı sağlar,

diz ekleminde oluşan stresi azaltır ve koordinasyonu artırır, proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, neopren materyal.



### 6131 Genucare ligament light

Patella destekli, flexible balenli dizlik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 30-33 |
| <b>M</b> :   | 33-36 |
| <b>L</b> :   | 36-39 |
| <b>XL</b> :  | 39-42 |
| <b>XXL</b> : | 42-45 |

#### Endikasyon

Artrit (romatoid), osteoartrit, travma/ameliyat sonrası irritasyon, tendomyopati, instabilite

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminin stabilitesinin artırılmasını desteklenmesini

sağlar, patella pedi ve açıklığı patellayı destekler, proprioseptif etki sağlar.

#### Özellikler

Dizliği çevreleyen velkro bantlarla daha fazla hasta uyumu, yanlarda spiral balenler, neopren materyal.



### Knee support wool

Yün dizlik

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 30-33 |
| <b>M</b> :   | 33-36 |
| <b>L</b> :   | 36-39 |
| <b>XL</b> :  | 39-42 |
| <b>XXL</b> : | 42-45 |

#### Endikasyon

Romatizma, diz ağrıları, dizin sıcak tutulması gereken durumlar

#### Etki Mekanizması

Diz ekleminde kompresyon kuvveti oluşturur, diz ekleminde destek verir ve ısı artışı sağlar, proprioseptif etki yaratır.

#### Özellikler

Yüksek kaliteli ve esnek angoret yün kumaş



### 7910 Malleocare Comfort

Malleol destekli, örme ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>XS</b> :  | 17-20 |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, eklem effüzyonu

#### Etki Mekanizması

Elastik comfort örme proprioseptif etki sağlar, malleoler bölgedeki pedler masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, bileği stabilize eder.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda masaj etkisi yaratan pedler



### 7911 Malleocare Easy

Örme ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>XS</b> :  | 17-20 |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Ayak bileğinin enflamasyon ve zorlanmaları, kas zorlanmaları, ezilme, spor aktivitelerinde profilaktik amaçlı

#### Etki Mekanizması

Elastik örme irrite olmuş eklemi rahatlatır ve sabit bir kompresyon uygulayarak, hastanın hareketleriyle oluşan

masaj etkisinin de katkısıyla eklemi çevreleyen yumuşak dokulara kan akımını artırır.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım.



### 7920 Achicare Comfort

Aşıl destekli örme ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>XS</b> :  | 17-20 |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Aşiller tendonunun akut ve kronik inflamasyonu, postoperatif ve posttravmatik enflamasyon, aşılodoni, aşıl bursiti

#### Etki Mekanizması

Elastik comfort örme proprioseptif etki sağlar, aşıl bölgedeki pedler masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve

sertliği azaltır, bileği stabilize eder.

#### Özellikler

Hava geçirgenliğine sahip, comfort örme sistem, özel dokunmuş bilek kıvrım dokuması ile yüksek hasta uyumu, yüksek esneklik ile rahat kullanım, yanlarda masaj etkisi yaratan pedler



### 7675 Malleocare form

Termoplastik destekli ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Stabil malleol kırıkları, stabilizasyon gereken durumlar (instabilite), ayak bileği medial ve lateral bağ yaralanmaları, ayak bileği distorsiyonu, post-op dönemde stabilizasyon amaçlı

#### Etki Mekanizması

Ayak bileğini stabilize eder.

#### Özellikler

Mükemmel konfor ve uyum için kişinin anatomik yapısına uygun şekillendirilen termoplastik splint, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yüksek kalite neopren materyal.



### 7640 Malleocare stable

Plastik destekli ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Stabil malleol kırıkları, kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, post operatif bakım, eklem effüzyonu

#### Etki Mekanizması

Ayak bileğini koruyarak hareket olanağı sağlar, ayak bileğini stabilize eder.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, malleolleri koruyan ve destekleyen plastik splint ve yüksek kalite neopren materyal.





### 7620 Malleocare basic

Ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

#### Etki Mekanizması

Kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, esnek yapısı ile ayakkabı içine kolaylıkla giyilebilir.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, kolay giyilip çıkarılabilen pratik velcro sistemi, yüksek kalite neopren materyal.



### 7630 Malleocare flex

Malleol destekli ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Kronik ayak bileği instabilitesi, ligament yaralanmaları, eklem effüzyonu

#### Etki Mekanizması

Kompresyon sağlar, malleol bölgedeki ped masaj etkisi ile kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, ayak bileğini stabilize eder

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, malleoller destekleyen pedler ve yüksek kalite neopren materyal.



### 7530 Ankle support light

Ayak bilekliği

|              |       |
|--------------|-------|
| cm           |       |
|              |       |
| <b>XS</b> :  | 17-20 |
| <b>S</b> :   | 20-22 |
| <b>M</b> :   | 22-24 |
| <b>L</b> :   | 24-26 |
| <b>XL</b> :  | 26-28 |
| <b>XXL</b> : | 28-30 |

#### Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

#### Etki Mekanizması

Elastik dokuma proprioseptif etki sağlar, kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır.

#### Özellikler

Ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilen hafif ve esnek dokuma.



### 7210 Foot lifter

Dorsi-fleksiyon ayak bileği ortezi

universal

#### Endikasyon

Düşük ayak, peroneal nöropati

#### Etki Mekanizması

Ayağı doğru pozisyonda tutarak, destekler ve yürümeyi kolaylaştırır.

#### Özellikler

Konforlu, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi.



### 7191 Hallux valgus combo

Hallux valgus gece ateli

sol/sağ  
universal

#### Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

#### Etki Mekanizması

Parmağı etkili bir şekilde çektirerek başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon

almasına yardımcı olur.

#### Özellikler

Basit ve etkili tasarım, esnek velcro bantlar ile sağlanan mükemmel konfor ve kullanım kolaylığı, ayakkabı ile kullanılabilen hafiflik, daha uzun bantlarla gece için sağlanan ekstra stabilizasyon.



### 7190 Hallux valgus light

Hallux valgus gündüz ateli

sol/sağ  
universal

#### Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

#### Etki Mekanizması

Parmağı etkili bir şekilde çektirerek başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon

almasına yardımcı olur.

#### Özellikler

Basit ve etkili tasarım, esnek velcro bantlar ile sağlanan mükemmel konfor ve kullanım kolaylığı, ayakkabı ile kullanılabilen hafiflik.



## 7621 Ankle support short

Ankle support

|            |         |
|------------|---------|
| cm         |         |
|            |         |
| <b>S</b>   | : 20-22 |
| <b>M</b>   | : 22-24 |
| <b>L</b>   | : 24-26 |
| <b>XL</b>  | : 26-28 |
| <b>XXL</b> | : 28-30 |

### Endikasyon

Ayak bileği tendinitleri, ayak bileği ödemleri, artrit ve osteoartrit, bağ zayıflıklarında kompresyon amaçlı

### Etki Mekanizması

Kan dolaşımını artırır ve sertliği azaltır, esnek yapısı ile ayakkabı içine kolaylıkla giyilebilir.

### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş yapı, neopren materyal.



## 7130 Metatarsal cushion

Metatarsal silikon ped

universal

### Endikasyon

Transvers arkın desteklenmesi gereken durumlar, metatars başı hassasiyetleri, metatars başı kollozitetleri, metatarsalji

### Etki Mekanizması

Metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

### Özellikler

Rahatça giyilebilen ve kaymayan örme materyal, anatomik olarak şekillendirilmiş ve yerleştirilmiş silikon destek.



## 5010 Pavlic harness Ida

Pavlik bandajı

|          |       |
|----------|-------|
| ay       |       |
| <b>S</b> | : 2-6 |
| <b>M</b> | : 4-8 |
| <b>L</b> | : 6-9 |

### Endikasyon

Konjenital kalça subluksasyonu yada dislokasyonu, 9 aylığa kadar olan bebeklerde görülebilen konjenital displazi ve kalça eklemi dislokasyonları

### Etki Mekanizması

Kalçayı fleksiyon ve abduksiyonda tutar, asetebulumda femuru merkezi pozisyonunda tutar.

### Özellikler

Bebeği incitmeyen, konforunu koruyan destekli ve ayarlanabilir bantlar, yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş, kolay ve hızlı takılıp çıkarılabilen pratik velcro sistemi, özel tasarım ayak bölümü ile ekstra stabilizasyon.



## 5011 Pavlic bandage

Pavlik bandajı

|          |       |
|----------|-------|
| ay       |       |
| <b>S</b> | : 2-6 |
| <b>M</b> | : 4-8 |
| <b>L</b> | : 6-9 |

### Endikasyon

Konjenital kalça subluksasyonu yada dislokasyonu, 9 aylığa kadar olan bebeklerde görülebilen konjenital displazi ve kalça eklemi dislokasyonları

### Etki Mekanizması

Kalçayı fleksiyon ve abduksiyonda tutar, asetebulumda femuru merkezi pozisyonunda tutar

### Özellikler

Toka/kilit sistemi ile ayarlanabilir bantlar.



## 5020 Hip abduction brace

Kalça abdüksiyon ortezi

|                    |         |
|--------------------|---------|
| pevlik ölçüsü (cm) |         |
| <b>XS</b>          | : 35-40 |
| <b>S</b>           | : 40-45 |
| <b>M</b>           | : 45-50 |
| <b>L</b>           | : 50-55 |

### Endikasyon

Konjenital kalça subluksasyonu yada dislokasyonu, konjenital displazi ve kalça eklemi dislokasyonları

### Etki Mekanizması

Kalçayı fleksiyon ve abduksiyonda tutar, aynı zamanda yürümeye de izin verir

### Özellikler

Kalçanın pozisyonu koruyacak kadar rijit, harekete izin verecek kadar esnektir. Konfor sağlayan plastozot yastıklarla desteklenmiştir.



## 5030 Hip abduction Adil Surat

Adil Surat tipi kalça abdüksiyon ortezi

|          |        |
|----------|--------|
| ay       |        |
| <b>S</b> | : 2-6  |
| <b>M</b> | : 4-8  |
| <b>L</b> | : 6-10 |

### Endikasyon

Femur başının asetabulum içindeki normal santralizasyonu, femur başının avasküler nekroz oluşumunun önlenmesi, kalçaların fleksiyon, abduksiyon ve iç rotasyonda tutulmasını gerektiren durumlar

### Etki Mekanizması/Özellikler

Ortezin plastik kısımları her iki alt ekstremitede dizleri içine alarak uyuk ve baldır ortasına kadar uzanır, diz eklemleri 30-40 derece fleksiyonda pozisyonlanır, abduksiyon açısı alüminyum abduksiyon barı ile ayarlanabilir, kalça fleksiyonu ile birlikte rotasyonunda da etkindir.



### 7110 Silicon insole

Silikon tabanlılık

|                |       |
|----------------|-------|
| ayakkabı<br>no |       |
|                |       |
| <b>S</b> :     | 36-38 |
| <b>M</b> :     | 39-40 |
| <b>L</b> :     | 41-42 |
| <b>XL</b> :    | 43-44 |
| <b>XXL</b> :   | 45-46 |

#### Endikasyon

Pes planus, genel topuk ağrıları, plantar fasiit, fat padin ağrılı durumları, artralji

#### Etki Mekanizması

Ayak ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur.

#### Özellikler

Şok absorbe edici mavi noktali bölgeler, hava geçirgen sistem, anatomik olarak şekillendirilmiş taban yapısı ve ark desteği, mükemmel silikon kalitesi



### 7120 Heel cup

Silikon topukluk

|                |       |
|----------------|-------|
| ayakkabı<br>no |       |
|                |       |
| <b>S</b> :     | 36-38 |
| <b>M</b> :     | 39-41 |
| <b>L</b> :     | 42-44 |

#### Endikasyon

Aşilodin-tendomiopati, topuk dikenini, haglund deformasyonu, plantar fasiit, kalkaneal ağrı

#### Etki Mekanizması

Kalkaneel kemik etrafında yumuşak bir doku oluşturur, topuk dikeninde basıncı azaltır.

#### Özellikler

Şok absorbe edici mavi noktali bölgeler, anatomik olarak şekillendirilmiş topuk yapısı, mükemmel silikon kalitesi



### 7140 Toe separator

Silikon parmak ayırıcı

|                |       |
|----------------|-------|
| ayakkabı<br>no |       |
|                |       |
| <b>S</b> :     | 36-38 |
| <b>M</b> :     | 39-41 |
| <b>L</b> :     | 42-44 |

#### Endikasyon

Halluks valgusun konservatif tedavisinde ve cerrahi sonrasında

#### Etki Mekanizması

Parmağı iterek başparmak eklemlerindeki yükü azaltır ve parmağın doğru pozisyon almasına yardımcı olur.

#### Özellikler

Rahat kullanılabilen kaymayan silikon destek.



### 92100 Foot wedge

Pronasyon / supinasyon tabanlılık

|                |       |
|----------------|-------|
| ayakkabı<br>no |       |
|                |       |
| <b>A</b> :     | 35-37 |
| <b>B</b> :     | 38-39 |
| <b>C</b> :     | 40-41 |
| <b>D</b> :     | 42-43 |
| <b>E</b> :     | 44-45 |

#### Endikasyon

Kalkanel varus ve valgus (iç/dış kama) durumları

#### Etki Mekanizması

Ayaktaki basıncın dağılımını düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar, ağrıyı azaltır.

#### Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, plantar yüzey

üzerindeki şoku azaltmak için topukta ve arkta ekstra polimer içermektedir. Hafif tasarımı ile yürürken ve sert yüzeylerde rahatlık sağlar. Vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmaz, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir. Daha fazla rahatlık ve uyum için makas yardımıyla kenarları şekillendirilebilir.



### 92255 Thin insole

İnce tabanlılık

|                |       |
|----------------|-------|
| ayakkabı<br>no |       |
|                |       |
| <b>A</b> :     | 34-36 |
| <b>B</b> :     | 37-40 |
| <b>C</b> :     | 41-44 |
| <b>D</b> :     | 44-46 |

#### Endikasyon

Diabetik ayak, ayağın ağrılı durumları

#### Etki Mekanizması

Ayaktaki basıncın dağılımını düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar, ağrıyı azaltır.

#### Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, plantar yüzey

üzerindeki şoku azaltmak için topukta ve arkta ekstra polimer içermektedir. Hafif tasarımı ile yürürken ve sert yüzeylerde rahatlık sağlar. Vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmaz, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir. Daha fazla rahatlık ve uyum için makas yardımıyla kenarları şekillendirilebilir.



### 92250 Underliners

Tabanlılık

|                |       |
|----------------|-------|
| ayakkabı<br>no |       |
|                |       |
| <b>A</b> :     | 35-37 |
| <b>B</b> :     | 38-39 |
| <b>C</b> :     | 40-41 |
| <b>D</b> :     | 42-43 |
| <b>E</b> :     | 44-45 |

#### Endikasyon

Diabetik ayak, ayağın ağrılı durumları

#### Etki Mekanizması

Ayaktaki basıncın dağılımını düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar, ağrıyı azaltır.

#### Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, plantar yüzey

üzerindeki şoku azaltmak için topukta ve arkta ekstra polimer içermektedir. Hafif tasarımı ile yürürken ve sert yüzeylerde rahatlık sağlar. Vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmaz, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir. Daha fazla rahatlık ve uyum için makas yardımıyla kenarları şekillendirilebilir.



### 92260 Longitudinal arch support

Longitudinal ark desteği

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ayakabı<br>no                                                                     |         |
|  |         |
| <b>S</b> :                                                                        | 36-38,5 |
| <b>M</b> :                                                                        | 39-43,5 |
| <b>L</b> :                                                                        | 44+     |

#### Endikasyon

Pes planus, pes kavus, longitudinal arkın desteklenmesi gereken durumlar

#### Etki Mekanizması

Longitudinal arkı destekler, rahatlık sağlar.

#### Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmez, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



### 92220 Bone spur pad

Epin topukluk

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ayakabı<br>no                                                                       |         |
|  |         |
| <b>S</b> :                                                                          | 36-38,5 |
| <b>M</b> :                                                                          | 39-43,5 |
| <b>L</b> :                                                                          | 44+     |

#### Endikasyon

Topuk dikenli, genel topuk ağrıları, plantar fasiit, aşı tendonu hassasiyetleri

#### Etki Mekanizması

Kalkaneel kemik etrafında yumuşak bir doku oluşturur, topuk dikeninde basıncı azaltır.

#### Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmez, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



### 92200 Heel wedge

Topuk yükseltici

|                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ayakabı<br>no                                                                       |         |
|  |         |
| <b>S</b> :                                                                          | 36-38,5 |
| <b>M</b> :                                                                          | 39-43,5 |
| <b>L</b> :                                                                          | 44+     |

#### Endikasyon

Aşıl tendinitleri, kısmi ya da tam aşıl rüptürleri, aşıl tendonunun zorlanmaları, post-op aşıl rüptürleri, topuğun yükseltilmesi gereken durumlar, severe hastalığı

#### Etki Mekanizması

15 derecelik bir açı oluşturarak, ayaktaki basıncın dağılımını düzenler ve topuk üzerindeki yükün azalmasını sağlar.

#### Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmez, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



### 92240 Tender foot pad

Metatarsal ped

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ayakabı<br>no                                                                         |         |
|  |         |
| <b>S</b> :                                                                            | 36-38,5 |
| <b>M</b> :                                                                            | 39-43,5 |
| <b>L</b> :                                                                            | 44+     |

#### Endikasyon

Transvers arkın desteklenmesi gereken durumlar, metatars başı hassasiyetleri, metatars başı kollozitetleri, metatarsalji

#### Etki Mekanizması

Metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

#### Özellikler

Üzeri yumuşak dokuma ile kaplanmış özel polimerden üretilmiştir, hafif tasarımı ile yürürken rahatlık sağlar, vücut ağırlığının oluşturacağı baskı ile deforme olmaz, incelmez, ayakkabı ile rahatlıkla kullanılabilir.



### 7310 Insole 3/4 stable

Çelik destekli deri tabanlık

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ayakabı<br>no                                                                       |       |
|  |       |
| <b>0</b> :                                                                          | 33-34 |
| <b>1</b> :                                                                          | 35-36 |
| <b>2</b> :                                                                          | 37-38 |
| <b>3</b> :                                                                          | 39-40 |
| <b>4</b> :                                                                          | 41-42 |
| <b>5</b> :                                                                          | 43-44 |
| <b>6</b> :                                                                          | 45-46 |

#### Endikasyon

Pes planus, pes kavus, metatarsalji

#### Etki Mekanizması

Longitudinal arkı destekler, metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, üzeri yumuşak deri ile kaplanmış ve paslanmaz çelik ile desteklenmiştir. Metatars bölgesi daha fazla konfor için yastıkla desteklenmiştir. Çok dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlüdür.



### 7320 Insole 3/4

Kösele tabanlık

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ayakabı<br>no                                                                         |           |
|  |           |
| <b>35</b>                                                                             | <b>40</b> |
| <b>36</b>                                                                             | <b>41</b> |
| <b>37</b>                                                                             | <b>42</b> |
| <b>38</b>                                                                             | <b>43</b> |
| <b>39</b>                                                                             | <b>44</b> |

#### Endikasyon

Pes planus, pes kavus, metatarsalji

#### Etki Mekanizması

Longitudinal arkı destekler, metatars bölgesinde yastık görevi yapar ve yükü dağıtır.

#### Özellikler

Anatomik olarak şekillendirilmiş, üzeri yumuşak kösele ile kaplanmıştır. Metatars bölgesi yastıkla desteklenmiştir.





### Seal tight

Alçı koruyucu

**Çocuk Kol** (küçük, orta, büyük)  
**Çocuk Bacak** (küçük, orta, büyük)  
**Kol** (kısa, uzun, kısa-geniş)  
**Bacak** (kısa, uzun, kısa-geniş)  
**Ayak Bileği**



### 1911 Memory foam pillow

Boyun Yastığı

universal

#### Özellikler

Gerçek viskoda 3D kesim tekniği ile üretilmiştir. Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar. Tümüyle hipo-alerjik ve anti bakteriyeldir.

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez. Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar. Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



### 1912 Back pillow

Bel/sırt yastığı

universal

#### Özellikler

Kılıfı %100 polipropilenden üretilmiştir. Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar. Tümüyle hipo-alerjik ve anti bakteriyeldir.

Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez. Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar. Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



### 1913 Sit pillow

Oturma simidi

universal

#### Özellikler

Gerçek viskoda 3D kesim tekniği ile üretilmiştir. Örme kumaş nefes alır ve hava transferi sağlar. Tümüyle hipo-alerjik ve anti bakteriyeldir.


Kir, toz, leke tutmaz, bakteri oluşumuna izin vermez. Terleme ile oluşan nemin hızla kurumasını sağlar. Dokusu yumuşak ve göz alıcıdır, size konforlu bir kullanım sunar.



### B108 Frog splint

Parmak ateli-kurbağa

S  
M  
L

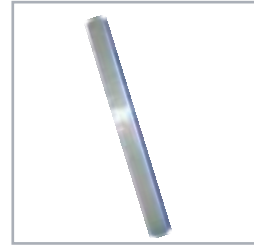

### B10671 Strip splint

Parmak ateli-düz

universal



### B109 Cot splint

Parmak ateli-beşik

S  
M  
L



### B111 Baseball splint

Parmak ateli-beyzbol

S  
M  
L



### B1070 Stax splints

Mallet parmak ateli

|   |     |
|---|-----|
| 1 | 5   |
| 2 | 5.5 |
| 3 | 6   |
| 4 | 7   |



## 8120 Crutch

Alüminyum koltuk değneği

çocuk  
yetişkin  
maxi

### Özellikler

Şekillendirildikten sonra özel olarak sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063 alaşımlı alüminyum boru

profilden üretilmektedir, 17 cm'e kadar yükseklik ve 15 cm'e kadar elcek ayarlaması yapılabilir, mükemmel uyum için 3 farklı boyda üretilmektedir.



## 8130 Forearm crutch

Kanedyen koltuk değneği

universal

### Özellikler

Mat eloksalla kaplanmış ve sertleştirilmiş EN-6063 alaşımlı alüminyum boru profilden üretilmektedir,

plastik kolcak tek parçadır, güvenli ve rahattır, 28 cm'e kadar yükseklik ayarlaması yapılabilir, gri ve mavi renkleri vardır.



## 8140 Cane

Denge bastonu

universal

### Özellikler

Sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063 alaşımlı alüminyum profilden

üretilmektedir, elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır yüksekliği 22 cm'ye kadar ayarlanabilir.



## 8150 Tripode cane

Üç ayaklı denge bastonu

universal

### Özellikler

Krom kaplanmış dayanıklı borudan üretilmektedir,

elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır, yüksekliği 20cm'ye kadar ayarlanabilir



## 8160 Quadripode cane

Dört ayaklı denge bastonu

universal

### Özellikler

Krom kaplanmış dayanıklı borudan üretilmektedir,

elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır, yüksekliği 20cm'ye kadar ayarlanabilir



## 8215 Shower chair compact

Katlanır klozet yükseltici sandalye

universal

### Özellikler

Portatiftir, kolayca katlanır, yüksekliği ayarlanabilir.



## 8180 Walker

Katlanır walker

universal

### Özellikler

Şekillendirildikten sonra özel olarak sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063

alaşımlı alüminyum profilden üretilmektedir, kolay katlanır, taşınabilir, elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır



## 8190 Walker act

Hareketli katlanır walker

universal

### Özellikler

Şekillendirildikten sonra özel olarak sertleştirilmiş ve mat eloksalla kaplanmış EN-6063

alaşımlı alüminyum profilden üretilmektedir, kolay katlanır, taşınabilir, elcekleri anatomik, rahat ve dayanıklıdır



varicare®



## 9111

Dizaltı burnu kapalı class 1

## 9115

Dizaltı burnu açık class 1

## 9211

Dizaltı burnu kapalı class 2

## 9215

Dizaltı burnu açık class 2



## 9121

Dizüstü burnu kapalı class 1

## 9125

Dizüstü burnu açık class 1

## 9221

Dizüstü burnu kapalı class 2

## 9225

Dizüstü burnu açık class 2



## 9131

Külotlu burnu kapalı class 1

## 9135

Külotlu burnu açık class 1

## 9231

Külotlu burnu kapalı class 2

## 9235

Külotlu burnu açık class 2



### Endikasyonlar:


- Primer ve sekonder varikoze
- Derin venöz yetmezlik
- Tromboflebit
- Derin ven trombozunun önlenmesi ve derin ven trombozu sonrası komplikasyonlarının önlenmesi
- Kronik venöz damar yetmezliği
- Hamilelikteki varisler ve ödemler
- Ameliyattan ve yaralanmalardan sonraki ödemler
- Lenf ve lip ödemler
- Toplar damar ağrıları için önlemler
- Anjiyodisplazi
- Damar sertleşmesindeki tedaviyi destekleme
- Ven ameliyatlarından sonra hareketsizlik sonucu ortaya çıkan tıkanma durumları (artorojen tıkanma sendromu ve pereziler)

### Kontraendikasyonlar:


- İleri evre arter hastalıkları
- İleri evre kalp yetmezliği
- İltihaplı flebit
- Venöz gangren

### Önemli!

Kompresyon derecesinin muayene eden doktor tarafından belirlenmesi gereklidir. Tedavinin etkisi ve devamlılığı açısından, düzenli bir şekilde gerçekleştirilen doktor kontrolleri önerilmektedir.

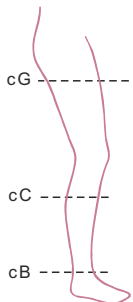

| Çevre ölçüsü (cm) | Bedenler |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 1        | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
| cB                | 18-20    | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| cC                | 28-34    | 30-37 | 32-40 | 34-43 | 36-46 | 38-49 | 40-51 |
| cG                | 43-48    | 46-52 | 49-56 | 52-60 | 55-64 | 58-68 | 61-72 |

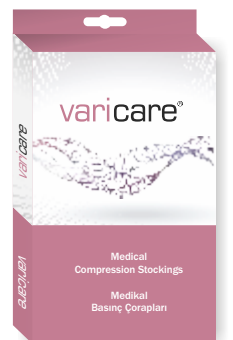





orthocare®

 arden  
medikal, sađık i ve diğ. tic. ltd. ęti.

İvedik OSB 524. Sokak

No:42 OSTİM 06370

Ankara TURKEY

Tel: (+90312) 394 14 54 (pbx)

Fax: (+90312) 394 14 57

[export@orthocare.com.tr](mailto:export@orthocare.com.tr)

[www.orthocare.com.tr](http://www.orthocare.com.tr)