



SCOOPER

Türkiye'nin İlk Yerli Video Laringoskopi Cihazı...



### SCOPER MOBİL ÜNİTE


- Tablet monitör
- Hareketli monitör kolu
- Tekerlekli mobil stand
- Malzeme sepeti
- Monitör koruyucu kasa

## Bir Bakışta SCOPER Mobil Uyumlu Sistem

### TİTANYUM ÇOK KULLANIMLIK BLEYD



- İnce ve Zarif Bleyd Uç Tasarımı

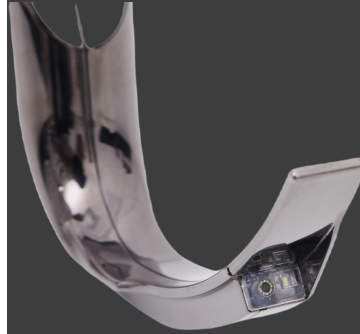

- Yüksek Çözünürlüklü Kamera
- Dual-Led Aydınlatma
- Buğu Önleyici (Anti-fog) Sistem



### SCOPER MOBİL UYGULAMASI

- Fotoğraf Çekme / Video Kayıt
- Kayıtları Ekran Üzerinde İzleme
- Hasta Klinik Not Ekleme
- USB'ye Aktarma
- Eğitim Modülü

## İNCE VE ZARİF BLEYD UÇ TASARIMI

Bleyd kısmı ince ve dar bir yapıya sahiptir. Bu özellik bleyd kısmının ağız içerisine yerleştirilmesi sırasında kolaylık sağlar. Ağız açıklığı dar olan ya da travma vakaları gibi servikal hareketleri sınırlı olan zor entübasyon olgularında ince ve dar bleyd yapısı ile avantaj sağlar.

## YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA

Scoper endoskopik sistemler için üretilmiş yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahiptir. Glottik açıklığı en ince detaylarına kadar görmenizi sağlar.


## DUAL-LED AYDINLATMA

Scoper hem kamera çevresinde hem de bitişğinde 2 ayrı LED aydınlatma sistemine sahiptir. Daha fazla ve dengeli bir aydınlatma sağlar. İkinci LED sistemi sayesinde kamera sisteminde sorun olsa bile direkt laringoskopi ile entübasyon işleminin yapılmasını mümkün kılar.

## BUĞU ÖNLEYİCİ (ANTI-FOG) SİSTEM

Scoper özel buğu önleyici sistemi sayesinde ağız içerisinde kameranın buğulanması engellenir. Bunun için bir ısınma bekleme süresine ihtiyaç duymaz. Görüntü alındığı andan itibaren buğu önleyici sistem aktif bir şekilde devreye girer ve net bir glottik görüntü almanızı sağlar.

## STANDART MAC-4 BLEYD

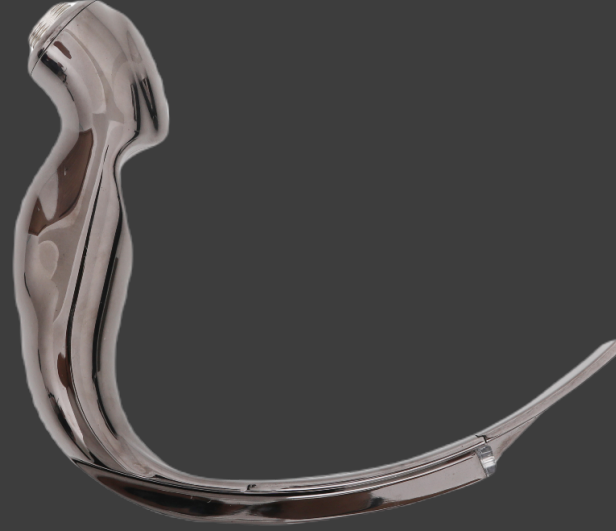

Titanyum bleyd yetişkin hastalarda kullanılmak üzere standart MAC-4 bleyd boyutlarında üretilmiştir. Bu sayede uzun boyun yapısına sahip hastaların da entübe edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Standart MAC-4 açısına sahip bleyd sayesinde dik açılı video laringoskopi cihaz kullanımında gözlenen tüpün yönlendirilmesi probleminin önüne geçilmiştir. Ayrıca bu özellik sayesinde cihaz ile direkt laringoskopi yapmak da mümkündür.

Titanyum dayanıklı, hafif ve biyouyumlu bir malzemedir. Bu sayede aynı bleyd ile standart temizlik prosedürlerine dikkat edilerek tekrar tekrar hiç bir ilave maliyet olmaksızın entübasyon işlemini uzun yıllar gerçekleştirmek mümkündür.

## TABLET MONİTÖR



Scoper herhangi bir android işletim sistemine sahip mobil cihazla kullanılabilir. Cihaz standart donanımında Samsung Galaxy S6 Lite 10.4 inc tablet ile birlikte verilir. 13 saate kadar batarya ömrüne sahiptir. Özel ekran koruması sayesinde çizilmelere karşı dayanıklıdır.

Tablet monitör özel kiosk modu sayesinde standart ayarlarında diğer tüm uygulamalara kapalıdır. Cihazda sadece Scoper uygulaması kullanılabilir. Sürekli olarak uyku modunda bekleyen tablet monitör acil durumlarda gecikme olmaksızın 1-2 sn içinde kullanıma hazırdır.

## AKSESUARLAR

### Taşıma Çantası



Scoper taşıma çantası monitör, bleyd, güç ve görüntü kabloları, stile, airway ve entübasyon tüplerini koyabileceğiniz özel bölmelere sahiptir.

### Güç Kablosu ve Adaptörü



2 m uzunlukta kablo ve adaptör aracılığı ile monitörü bir prize takarak ihtiyaç duyduğunuz anda hazır olması amacı ile şarj edebilirsiniz.

### USB Type-C Dönüştürücü



Verilerin USB'ye aktarılması amacıyla kullanılır.

### Özel Açılı Stile



Entübasyon işlemi sırasında kullanmak üzere tasarlanmıştır.

### Monitör Koruyucu Kılıf



Darbelere dayanıklı özel koruyucu kılıfı sayesinde Scoper hastane öncesi kullanımına da uygundur.

### Görüntü Kablosu



Type-C ucu monitöre, 5 pinli ucu ise bleyd kısmına takılır. Tak çalıştır özelliğine sahip Scoper Video Laringoskopi cihazı mobil uygulaması kamerayı otomatik olarak algılar.

Technomedicare Medikal Ticaret Limited Şirketi

Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası Apt. No: 10/50C/139 Gölbaşı/ANKARA

Telefon: (312) 484 97 77

E-posta: info@technomedicare.com

Web: www.technomedicare.com



www.scop-er.com

SCOPER

